

2018 年度末企画
キャンペーン
手配期限：2018年12月3日～2019年3月29日迄

Bruker
NanoIndentation
Probe Campaign

お得なこの機会を是非ご利用下さい。

Quantitative Nanomechanical Testing

10% OFF
YOUR PROBES ORDER

期間限定

ナノインデンテーション 測定圧子キャンペーン

■ キャンペーン概要

キャンペーン期間中、ナノインデンテーション測定圧子を定価より10%OFFにてご提供致します。

※但し校正サンプル、TI0039 Berkovich型圧子、TI0037 CubeCorner型圧子は、対象外となります

■ ご注文方法


ご注文時に下記キャンペーンコードをご記述下さい

キャンペーンコード

NI Probe Camp 2018YE

■ キャンペーン期間

2018年12月3日(月)～2019年3月29日(金)

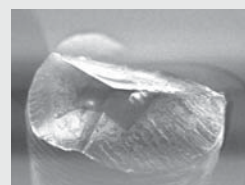



代表的なナノインデンテーション測定圧子のご案内




Berkovich型圧子 TI0039

最も広く用いられる圧子です。一般的な押し込み試験で幅広く利用されています。

※キャンペーン対象外

価格
¥190,000-(税抜)

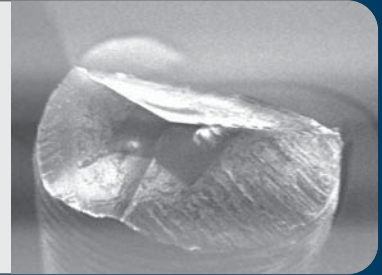


Cube Corner型圧子 TI0037

Berkovich型圧子より鋭い形状のため、表面形状像の分解能を上げたい場合や押し込み試験の間隔を狭めたい場合に用いられます。

※キャンペーン対象外


価格
¥190,000-(税抜)

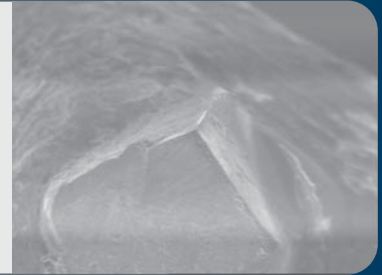

Conical型圧子

薄膜のスクラッチ測定やポリマー材料を中心とした柔らかい材料の機械的特性の測定に幅広く利用されます。


価格
¥341,000-~(税抜)

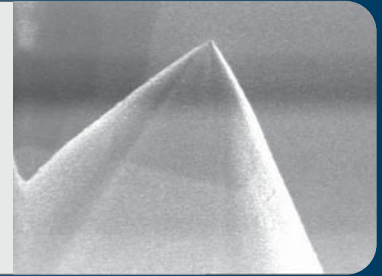

Flat End型圧子

接触面積を一定に保ちたい場合に用いられます。粘弾性材料やソフトマテリアルの測定に利用されます。

価格
¥261,000-~(税抜)

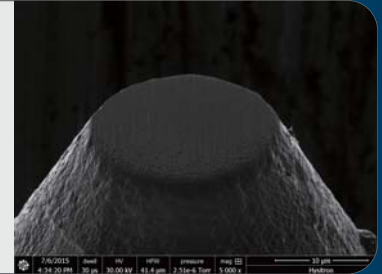

Pillar 型圧子

押し出し試験や、窪み底など特異な構造物に対する押し込み試験などに使用されます。

価格
別途お問い合わせ



各測定圧子の価格につきましては営業担当までお問い合わせください

- ▶ 特注圧子の作成も承ります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- ▶ 納期については別途担当営業までお問い合わせ下さい。



ブルカー・ジャパン株式会社 ナノ表面計測事業部

〒104-0033 東京都中央区新川 1-4-1
www.bruker-nano.jp

03-3523-6361



Info-nano.BNS.JP@bruker.com